


Elettrodo Bittium Omega-Snap™ 3-CH ECG

L'Elettrodo Bittium OmegaSnap™ 3-CH ECG è stato concepito per essere utilizzato con il dispositivo Bittium Faros™ 360 ECG per la misurazione dei segnali cardiaci (ECG).

Apparecchiatura

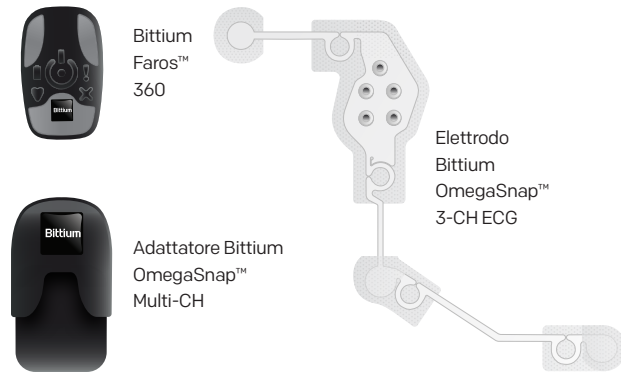

Attenzione!

- ▶ Posizionare l'elettrodo solo sulla pelle intatta e pulita.
- ▶ Prima di applicare l'elettrodo si raccomanda di non applicare lozioni o creme sulla parte della cute interessata.
- ▶ Non utilizzare elettrodi scaduti. Controllare la data di scadenza sull'imballaggio.
- ▶ L'elettrodo è monouso. Il riutilizzo dell'elettrodo potrebbe causare la contaminazione quindi eventuali infezioni.
- ▶ Spegnerne subito il dispositivo Faros ECG e rimuovere l'elettrodo dalla pelle se questo causa reazioni avverse quali irritazioni o arrossamenti cutanei. In caso di problemi mettersi in contatto con la struttura sanitaria di riferimento o la persona responsabile del trattamento.
- ▶ Sostituire l'elettrodo se non aderisce alla pelle.
- ▶ Rimuovere l'elettrodo dalla pelle dopo la misurazione.
- ▶ Utilizzare l'elettrodo solo con il dispositivo Bittium Faros™ ECG.
- ▶ I dispositivi Faros e l'adattatore OmegaSnap devono essere puliti tra un utilizzo e l'altro. Metodo di pulizia raccomandato: detergente senza alcool e salviette disinfettanti per dispositivi medici, ad esempio salviette mikrozid® o SaniCloth AF3.
- ▶ Seguire le presenti istruzioni. Per ulteriori dettagli consultare il manuale

Bittium



Bittium Biosignals Oy
Pioneerinkatu 6
70800 Kuopio, FINLANDIA




Tel: +358 (0)40 3442000
E-mail: bbs@bittium.com oppure
medical.support@bittium.com


www.bittium.com

Elettrodo Bittium OmegaSnap™ 3-CH ECG

Guida Rapida

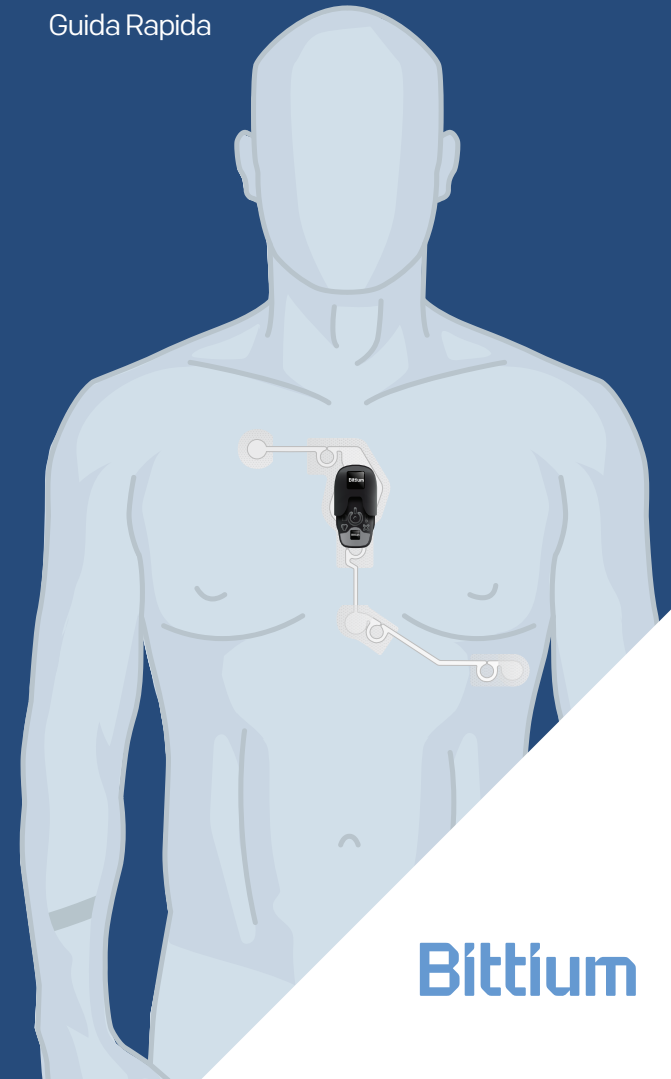




Bittium

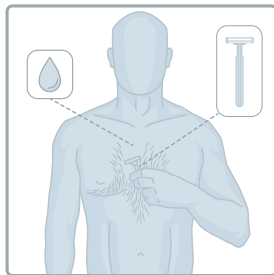

1.

Se necessario eliminare i peli superflui con un rasoio a mano o elettrico. Pulire la pelle in base alle istruzioni fornire dalla struttura sanitaria o dalla persona responsabile del trattamento. Per applicare l'elettrodo la pelle deve essere pulita e asciutta.

2. Assicurarsi che il sacchetto dell'elettrodo sia chiusa e verificare la data di scadenza. Strappare l'apertura del sacchetto ed estrarre

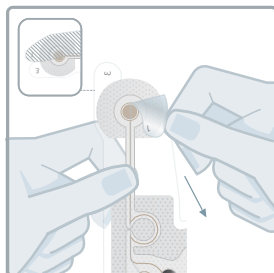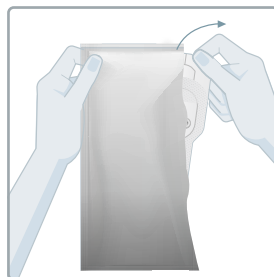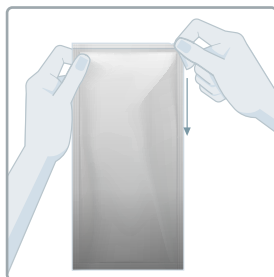


3.



Rimuovere il rivestimento di plastica (contrassegnato con il numero 1) dell'elettrodo. Non toccare la superficie adesiva con le dita.

4.

Applicare l'elettrodo sulla pelle. Posizionare l'elettrodo a ca. due dita di larghezza sotto alla tacca soprasternale. La parte superiore destra dell'elettrodo deve trovarsi sotto alla clavicola destra del paziente. Non rimuovere ancora i rivestimenti con i numeri 2 e 3.


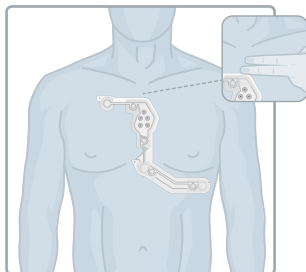


5. Dopo aver applicato correttamente la parte superiore dell'elettrodo rimuovere il secondo rivestimento (contrassegnato con il numero 2) e assicurarsi di aver fissato alla pelle il resto dell'elettrodo. Rimuovere quindi il rivestimento contrassegnato con il numero 3 che si trova sulla parte superiore dell'elettrodo in modo da fissarlo

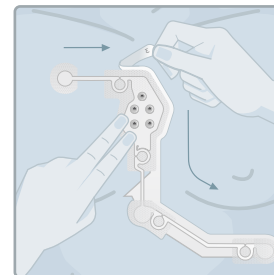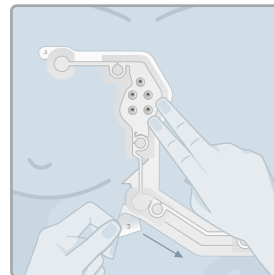


6.

Verificare che le superfici del dispositivo Faros e dell'adattatore OmegaSnap siano integre*. Collegare il dispositivo all'adattatore. Per garantire un buon collegamento, spingere il dispositivo e l'adattatore insieme con il pollice e l'indice. Fissare l'adattatore all'elettrodo. Spingere il dispositivo contro l'elettrodo in modo da collegare le chiusure a pressione.

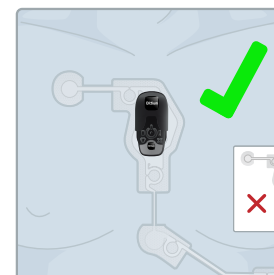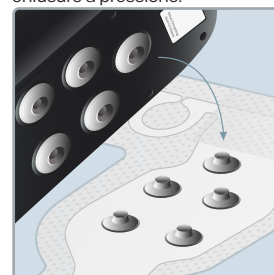


7.

Premere e rilasciare il tasto power per avviare la misurazione. Un segnale acustico e una spia verde lampeggiante indicano l'inizio della misurazione.


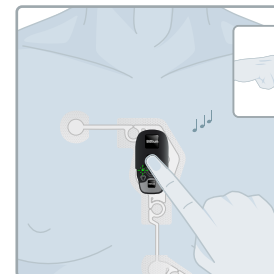


8.

Per fermare la misurazione, premere e tenere premuto il tasto power per ca. 8 secondi. Il dispositivo emette tre segnali acustici e la spia lampeggiante si spegne.

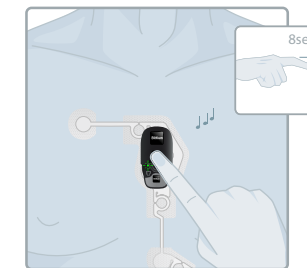

9. Rimuovere l'elettrodo dalla pelle, sollevando un bordo del patch e poi tirando il resto delicatamente. Se necessario, aggiungere dell'acqua e sapone. Smaltire l'elettrodo usato in base alle pratiche locali sullo smaltimento dei rifiuti. Restituire il dispositivo Faros ECG e l'adattatore OmegaSnap alla struttura sanitaria o al responsabile del trattamento.

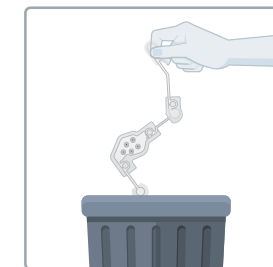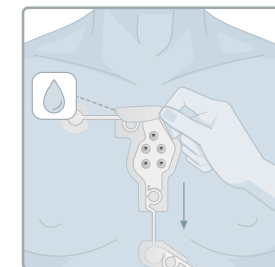

Simboli

CE Marchio CE

Non riutilizzare

Data di fabbricazione

LOT Numero lotto

Fabbricante

Data di scadenza

Seguire le istruzioni per

Solo per l'uso prescritto**

MD Dispositivo medico