


Equipement

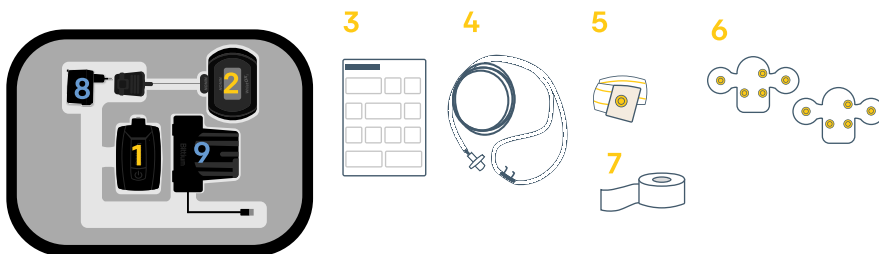

Matériel nécessaire à l'enregistrement

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Bittium Respiro™ | 5. RIP ceinture |
| 2. Oxymètre de pouls | 6. Respiro™ Patch pour 1 ceinture RIP |
| 3. Guide rapide/ Notes et Avertissements | et un patch de rechange |
| 4. Canule nasale | 7. Ruban adhésif médical |


Ne pas utiliser un dispositif abîmé ou une canule dont l'emballage est ouvert.


Matériel nécessaire pour charger le Respiro (si nécessaire):

- 8. Chargeur
- 9. Station de chargement


Démarrer un enregistrement

Attachez l'appareil et la ceinture RIP au patch comme indiqué aux étapes 1 à 3. Placez la ceinture RIP par-dessus la chemise sur la partie inférieure de votre sternum, comme indiqué à l'étape 4.

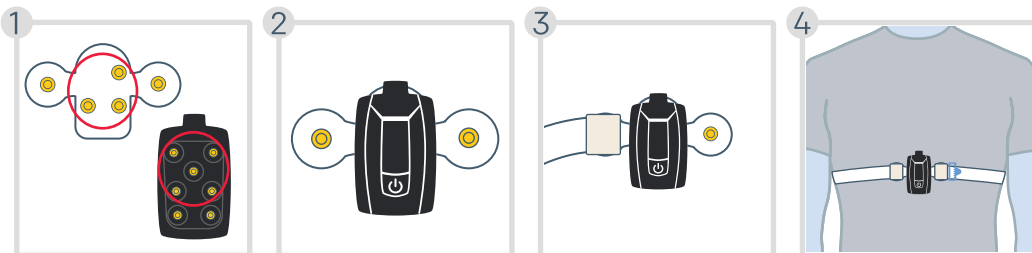


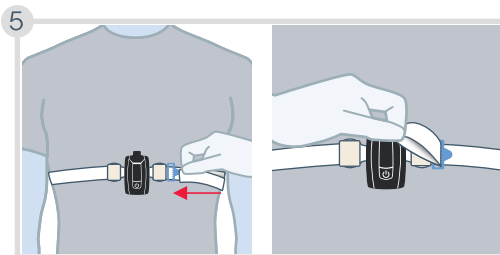




Ajustez la ceinture si elle est trop lâche.

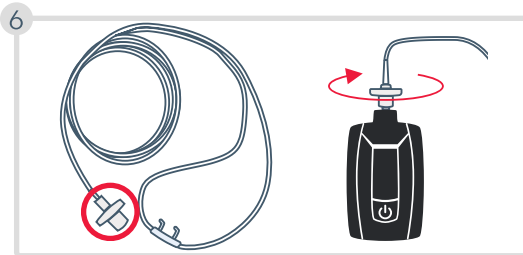


Fixer la canule au Respiro et tourner le connecteur légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez qu'il est connecté.

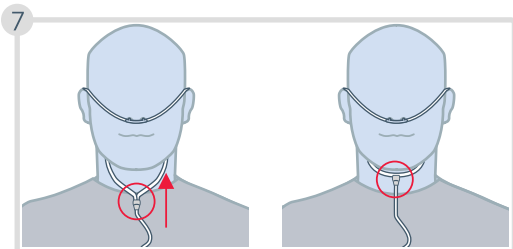

- Déplacez le curseur vers le haut des tubes pour ajuster la taille
- **Risque d'étouffement!** Positionnez les lunettes nasales avec précaution comme indiqué sur les images.
- En cas d'utilisation d'une canule avec embout, la partie buccale doit être orientée vers la bouche

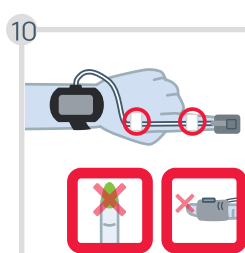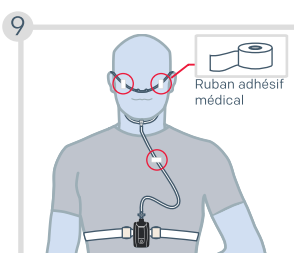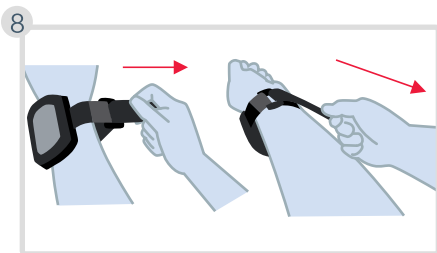


Risque d'étouffement!
Utilisez du ruban adhésif médical pour fixer la canule.

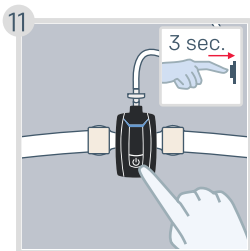


Si votre enregistrement est configuré pour démarrer automatiquement, ignorez les étapes 11 et 12.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que les indicateurs LED s'allument en bleu.

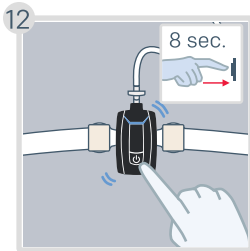


Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que l'appareil vibre et que les LED commencent à clignoter en bleu.

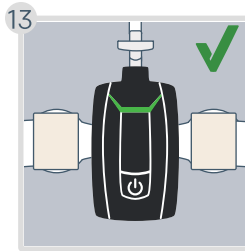


Les LED s'allument en **vert** pour indiquer que l'enregistrement a commencé avec succès.

Les LED s'éteignent automatiquement après 30 secondes si tout va bien et que vous êtes allongé.

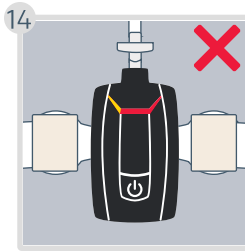

Si l'un des indicateurs LED clignote en **rouge** ou en **jaune**, vérifiez que l'élément correspondant à l'indicateur est correctement connecté. Les explications relatives aux indicateurs se trouvent à **la page suivante**.

Pendant un enregistrement

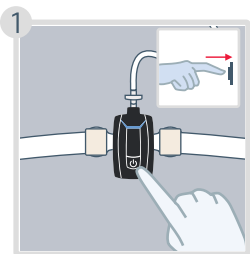


Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation pour marquer les moments où vous ne dormez pas, tels que le coucher, la toilette, le réveil... (optionnel)

Arrêt d'un enregistrement


Si votre enregistrement est configuré pour se terminer automatiquement, ignorez l'étape 1.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'appareil vibre 3 fois et que les indicateurs LED s'allument en bleu un par un de gauche à droite

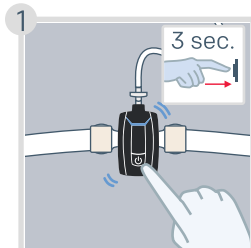

L'oxymètre de pouls s'éteint automatiquement.

Les indicateurs LED sont allumés en bleu pendant 5 minutes, ensuite vous pouvez passer à l'étape suivante.

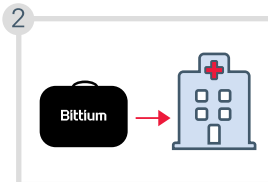

Retirez l'équipement de votre corps. Remettez tous les éléments dans la mallette et renvoyez-la à la clinique

Indicateurs LED : vue de l'avant du Respiro

Si l'un des voyants LED clignote en rouge ou en jaune, vérifiez que l'élément correspondant au voyant est correctement connecté. Lorsque les connexions sont correctes, les DEL s'allument en vert. Contactez votre professionnel de la santé si les LED sont allumées en rouge fixe ou si elles ne s'allument pas du tout.

Canule nasale

Oxymètre de pouls

Ceinture RIP



● Erreur

● Le doigt n'est pas inséré dans le capteur de doigt

● OK

Exemple

Canule nasale: OK



Oxymètre de pouls: Un doigt n'est pas inséré dans le capteur de doigt.

Ceinture RIP : Erreur

Changer le patch si le voyant rouge reste allumé.

Connectez Respiro à une prise de courant à l'aide de la station d'accueil et du chargeur si vous souhaitez connaître le niveau de charge de la batterie. Les indicateurs LED représentent le niveau de charge de la batterie de l'appareil. Si au moins deux voyants verts clignotent ou si tous les voyants sont allumés en permanence, la charge de la batterie est suffisante.

Bittium Respiro HSAT™

Assemblé et distribué pour



Bittium Biosignals Ltd
Pioneerinkatu 6
70800 Kuopio
Finlande

evismo AG
Schweighofstrasse 409
8055 Zürich
Switzerland

